

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το κάθισμα μπάνιου επιτρέπει στο χρήστη αύξηση της ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια του ντους, στην καθημερινή προσωπική υγιεινή, μειώνοντας την μυϊκή κόπωση λόγω της όρθιας θέσης καθώς και των κινδύνων ολίσθησης και τραυματισμών. Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια εξασφαλίζουν πρόσφυση με το δάπεδο και οι εκδόσεις που παρέχονται με τα ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάζει εύκολα το συνολικό ύψος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Επιπλέον, το κάθισμα μπάνιου με προσαρμοσμένο ύψος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους μεταξύ των μπροστινών και πίσω ποδιών. Συγκεκριμένα, τα μπροστινά πόδια μπορεί να είναι χαμηλότερα από τα πίσω: αυτό επιτρέπει στον χρήστη να διατηρεί μια πιο σωστή στάση του σώματος ενώ κάνει ντους, καθώς και να διευκολύνει τη διαδικασία καθίσματος. Η πλάτη του καθίσματος, όπου διατίθεται, παρέχει επιπλέον ασφάλεια και άνεση. Το κάθισμα μπάνιου μπορεί να μετακινηθεί εύκολα λόγω του μικρού βάρους του.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το κάθισμα μπάνιου παρέχει υποστήριξη σε ηλικιωμένους, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, άτομα με μειωμένη κινητικότητα των κάτω άκρων, οσφυϊκής χώρας και ισχίου, και σε όλους όσους έχουν δυσκολία να διατηρήσουν την όρθια θέση κατά τη διάρκεια του ντους της καθημερινής προσωπικής υγιεινής.

Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να κρατήσει από μόνος του την ισορροπία όταν κάθεται και όταν σηκώνετε καθώς και να έχει επαρκή ικανότητα να διατηρεί τον εαυτό του σε καθιστή θέση.

Το κάθισμα μπάνιου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο χρήστης έχει προβλήματα που σχετίζονται με διαταραχές ισορροπίας ή αντίληψης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το μέγιστο βάρος χρήστη που αναφέρεται στις οδηγίες τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι σωστά συναρμολογημένο σε σταθερή θέση.
- Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επιφάνεια χωρίς εμπόδια.
- Κατά τη συναρμολόγηση, τηρείτε αυστηρά αυτό που αναγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη.
- Ο κίνδυνος τραυματισμού των δακτύλων μπορεί να αυξηθεί κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή συναρμολόγησης
- Μην ταλαντεύετε στο κάθισμα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση, ανατροπή ή και σπάσιμο των ποδιών. Εάν χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι μπάνιου διατηρείτε πάντα τη στήριξη του καθίσματος και στα τέσσερα (4) πόδια.
- Για κανένα λόγο, Μην τροποποιείτε το κάθισμα μπάνιου και τα εξαρτήματά του.
- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα εάν έχει υποστεί ζημιά ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ρωγμές και οι παραμορφώσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής.
- Μετά τη χρήση, το κάθισμα μπάνιου πρέπει να αφαιρεθεί από το χώρο για να αποφευχθεί τυχόν εμπόδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα για διαφορετικό σκοπό από το προβλεπόμενο.
- Το κάθισμα δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η συντήρηση του προϊόντος περιλαμβάνει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση.

Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει τη δομική ακεραιότητα του προϊόντος και των εξαρτημάτων αυτού. Για τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πρέπει να φοράτε γάντια.
2. Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ήπιο απορρυπαντικό για τη διαδικασία καθαρισμού.
4. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση από άλλους χρήστες. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση από άλλους, το προϊόν πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί σωστά και να ελεγχθεί από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

Μην πετάτε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε εκ των προτέρων από την τοπική σας αρχή τον σωστό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για να το απορρίψετε.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

INTENDED USAGE:

The Shower Seat allows the user an increase in independence during the shower stage of daily personal hygiene, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risks. The non-slip rubber feet ensure grip with the floor, and the versions provided with the height adjustable legs allow the user to change easily the total height according to their requirements. In addition, the shower seat with customized height can be used with different length settings between the front and rear legs. In particular, the front legs can be lower than the rear ones: this allows the user to keep a more correct posture while taking a shower, as well as to facilitate standing and sitting procedures.

The backrest, were applicable, gives additional safety and comfort. The shower seat can be easily moved due to its light weight.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The Shower Seat is aimed to elderly people, wheelchair users, people with reduced mobility of lumbar, knee or hip, and to all those who have difficulty to maintain the standing position during the shower stages of daily personal hygiene. The user is required to have autonomy of balance during the sitting and standing procedures as well as to have adequate ability to keep sitting. The shower seat must not be used if the user has problems related to balance or perception disorders.

SAFETY WARNINGS AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceeded.
- Before every use, be sure the seat is correctly assembled in a stable position.
- The seat can be used only on surface that are free from obstacles.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting or assembling process.
- Do not swing on the seat, this may lead to slipping, overturning or subsidence of the legs. If you are using the shower chair, always keep the seat on its 4 legs.
- Do not modify the seat and its components in any way.
- Do not use the shower seat if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- After use, the shower seat should be removed from the shower tray to avoid any obstruction.
- Do not use the shower seat for a different purpose from the intended one.
- The shower seat must not be stored outdoors.

MAINTENANCE INFO:

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use.

The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or mild detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized and must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

MAX USER WEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗ:


ITEM CODE		MAX LOAD
0804461, 0806505i	ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ WITHOUT BACKREST	100 Kg
0804454, 0806064i	ΜΕ ΠΛΑΤΗ WITH BACKREST	100 Kg

ΔΕΝ χρειάζεται κανένα εργαλείο για την συναρμολόγηση.
NO tools needed for the assembly.

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας για το Κάθισμα Μπάνιου με Πλάτη. Στη συσκευασία για το προϊόν «Κάθισμα Μπάνιου χωρίς Πλάτη» δεν υπάρχει το μέρος της πλάτης.

Packaging Contents for the Shower Seat with Backrest. In the package for the product "Shower Seat without Backrest" there is not the part of the backrest.

2. Τοποθετήστε το πλαστικό μέρος του καθίσματος ανάποδα όπως δείχνει η φωτογραφία 2.
Place the plastic part of the seat upside down as shown in photo 2.


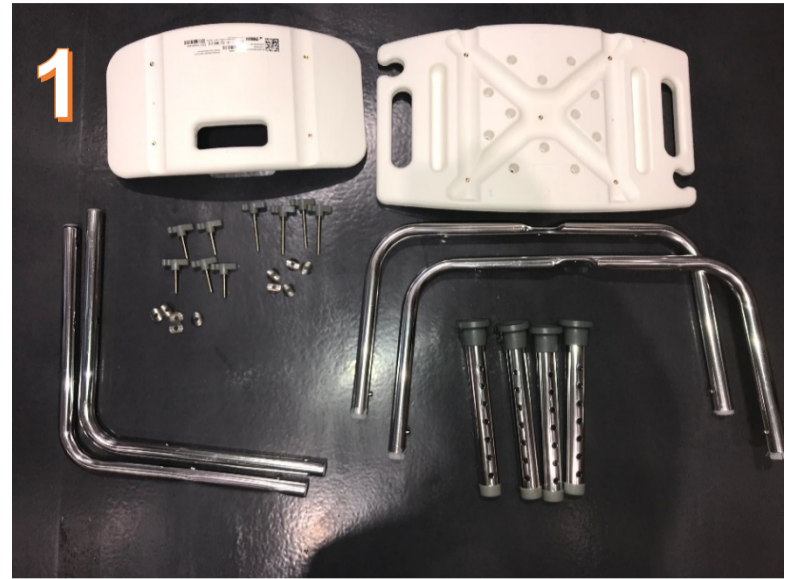


4. Τοποθετήστε το ρυθμιζόμενο μεταλλικό μέρος των ποδιών με το παπουτσάκι, πιέζοντας το κουμπί όπως την φωτογραφία 5.

Install the adjustable metal part of the leg with the rubber tip by pressing the button as in photo 5.


3. Τοποθετήστε το μεταλλικό μέρος των ποδιών, χιαστή όπως την φωτογραφία 3, τοποθετήστε μία κοντή βίδα όπως την φωτογραφία 4 και βιδώστε ελαφριά.

Place the metal part of the legs, cross as in photo 3, insert the short screw as in photo 4 and screw slightly.

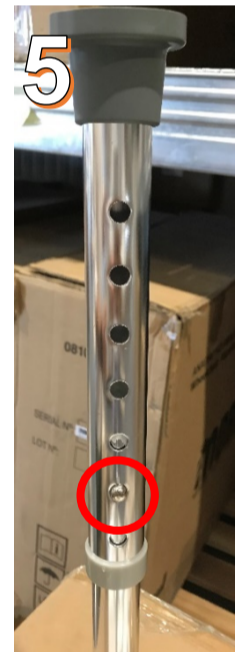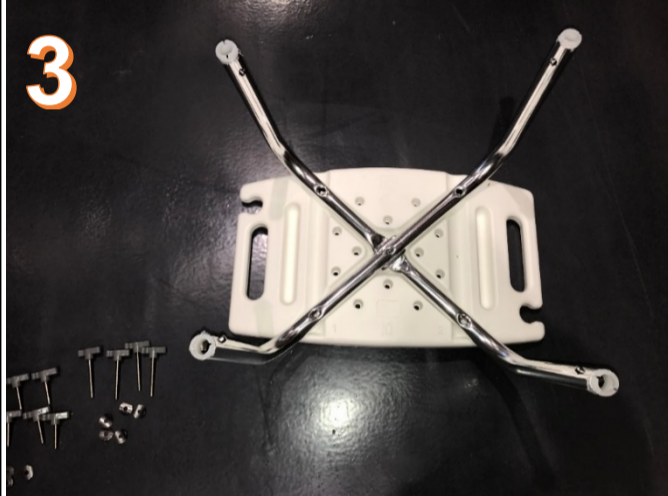


5. Για τα 0804454 & 0806064i: Τοποθετήστε το μεταλλικό μέρος της πλάτης, όπως την φωτογραφία 6, τοποθετήστε τις μακριές βίδες όπως την φωτογραφία 7 και βιδώστε ελαφριά.

Επαναλάβετε το ίδιο και για την άλλη πλευρά.
For 0804454 & 0806064i: Place the metal part of the backrest, as in photo 6, insert the long screws as in photo 7 and then tighten slightly. Repeat for the other side.

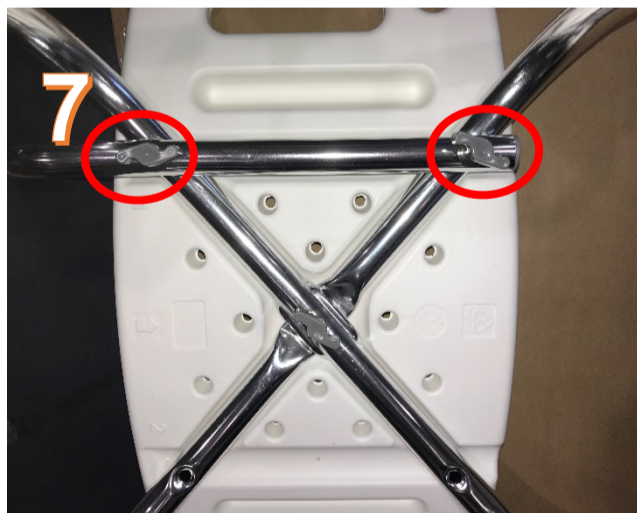

7. Για τα 0804454 & 0806064i: Τοποθετήστε το πλαστικό μέρος της πλάτης, όπως την φωτογραφία 8, τοποθετήστε τις κοντές βίδες και βιδώστε ελαφριά. Μόλις τοποθετήσετε και τις 4 βίδες, τότε σφίξτε τις όλες καλά για να ασφαλισουν.

For 0804454 & 0806064i: Place the plastic part of the backrest, as in photo 8, insert the short screws and tighten slightly. Once you have installed all 4 screws, then tighten them all to secure.

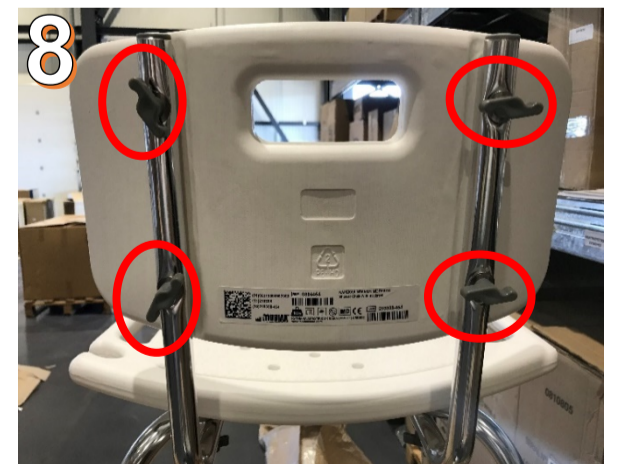

6. Μετά που θα έχετε τοποθετήσει όλες τις βίδες του καθίσματος, 5 σύνολο, τότε σφίξτε τις όλες καλά για να ασφαλισουν.

After you have installed all the seat screws, 5 in total, then tighten all well to secure.



L:	50cm
W:	30cm
H:	32cm